

Instructies voor het spoelen van de JP drain

Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe u de JP drain kan spoelen.

Frequentie: per dag
 Met cc spoelvloeistof per keer

Benodigdheden

- Steriel bekkentje
- 20cc spuit
- Nacl 0.9% spoelvloeistof
- Klemmetje of kocher


Stap 1: Zet de benodigdheden klaar




Stap 2: Doe de spoelvloeistof in het bakje




Stap 3: Zuig de voorgeschreven hoeveelheid Nacl 0.9% op uit het bakje

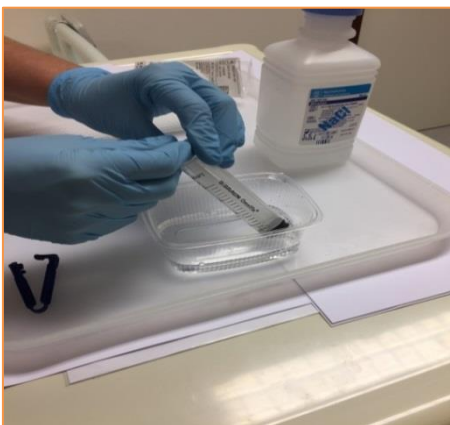

Stap 4: Bevestig een klemmetje/kocher op de slang zodat de vloeistof niet terugloopt

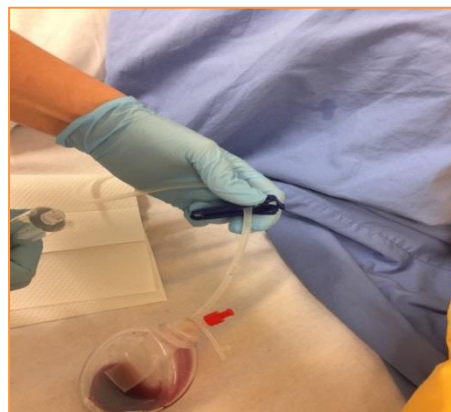


Stap 5: Maak het 'ballonnetje' los van de drainslang

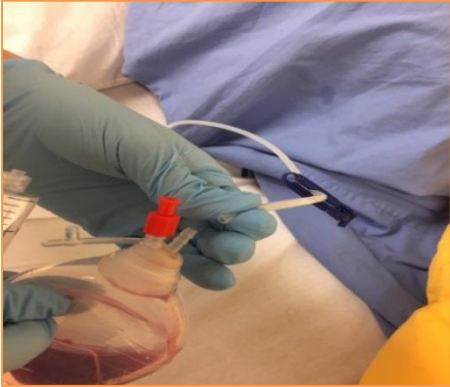


Stap 6: Sluit de spuit aan op de drainslang




Stap 7: Maak het klemmetje los

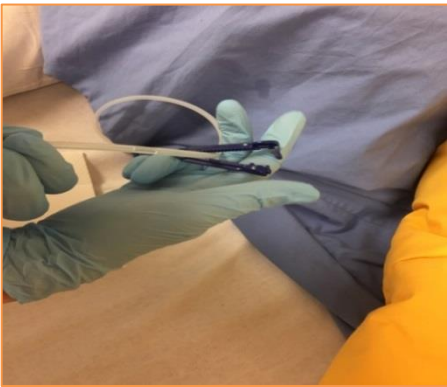


Stap 8: Spuit de spoelvloeistof rustig in de drainslang

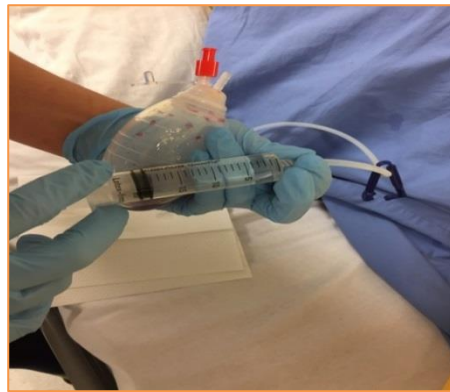

Stap 9: Zet het klemmetje dicht zodat de vloeistof niet terugloopt

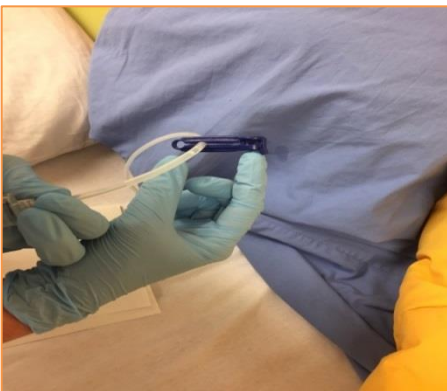


Stap 10: Sluit het 'ballonnetje' weer aan op de drainslang

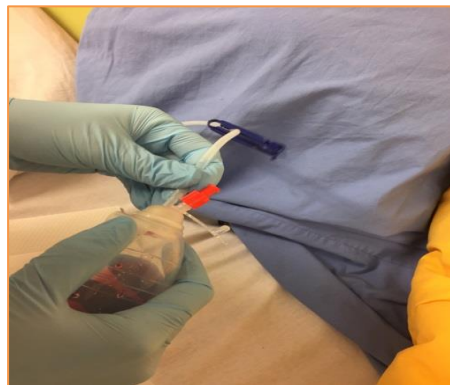

Stap 11: Draai het dopje van de ballon af



Stap 12: Knijp in het ballonnetje om het vacuüm er weer op te krijgen. Draai het dopje weer op de ballon terwijl u deze ingeknepen houdt

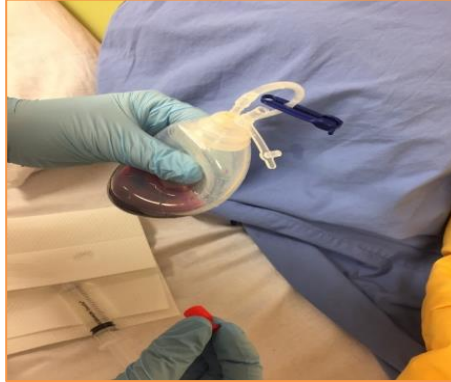

Stap 13: Verwijder het klemmetje van de drainslang



Vragen

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met afdeling 5 noord, ZGT Almelo. Telefoonnummer 088-708 36 40