

Spoelen neusmaagsonde met Thopazpomp

Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe u de neusmaagsonde (NMS) met Thopazpomp kan spoelen.

Frequentie: per dag
 Met cc spoelvloeistof per keer

Benodigdheden

- 50 cc blaasspuit
- Spoelvloeistof NaCl 0,9%
- Steriel bakje
- Klemmetje of kocher


Stap 1: Zet de benodigdheden klaar



Stap 2: Doe de spoelvloeistof in het steriele bakje




Stap 3: Zuig de voorgeschreven hoeveelheid NaCl 0.9% op uit het steriele bakje

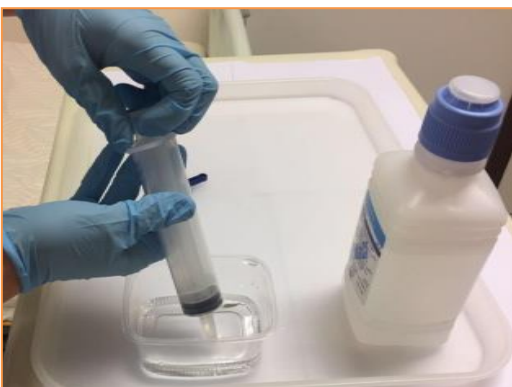

Stap 4: Zet de thopazpomp op standby (knop minimaal 3 seconden ingedrukt houden)



Stap 5: Zet de klem op de sonde zodat er geen vloeistof terug kan stromen

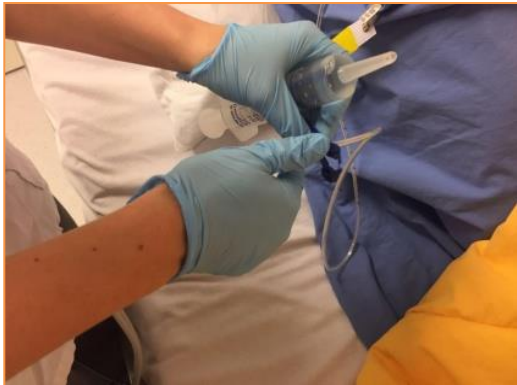

Stap 6: Koppel de slang los van de sonde



Stap 7: Plaats de spuit met NaCl 0.9% op de sonde



Stap 8: Maak het klemmetje los van de sonde



Stap 9: Spuit rustig de NaCl 0.9% in de sonde



Stap 10: Zet de klem weer op de sonde zodat de vloeistof niet gelijk terugloopt




Stap 11: Verwijder de spuit van de sonde



Stap 12: Sluit de slang weer aan op de sonde en verwijder de klem van de sonde



Stap 13: Zet de thopazpomp weer aan door op de 'aan' knop te drukken.

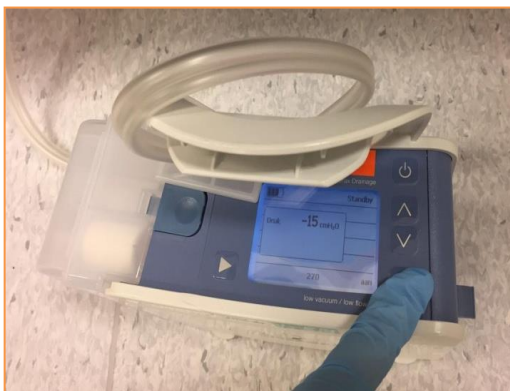

Instructievideo

<https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/onze-specialismen/heelkunde-chirurgie/voorlichting-verpleegkundige-handelingen-in-de-thuissituatie/voorlichtingsmateriaal-neusmaagsonde-spoelen-met-een-thopazpomp/>

Vragen

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met afdeling 5 noord, ZGT locatie Almelo. Telefoonnummer 088 708 36 40